


# OPTICAL CLIP

DESIGNED IN ITALY




## OPTICAL CLIP FOR PRESCRIPTION LENS APPLICATION

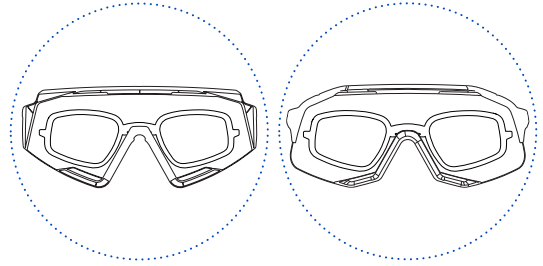

// SPECTRO


// DEMOS

## OPTICAL CLIP LENS SIZE

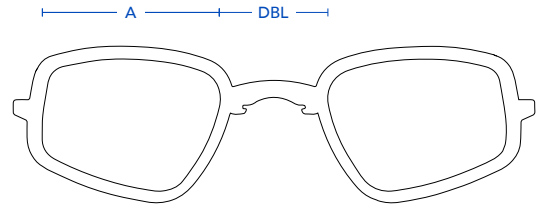

**A-50 // DBL-24**  
(size in mm)


## OPTICAL CLIP APPLICATION

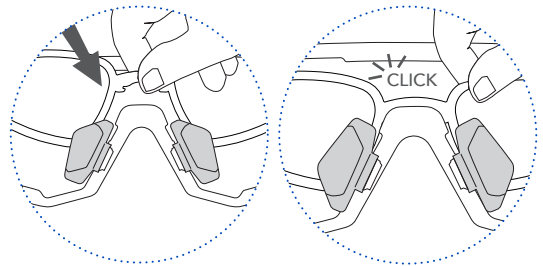

// 01

// 02


## OPTICAL CLIP POSITION

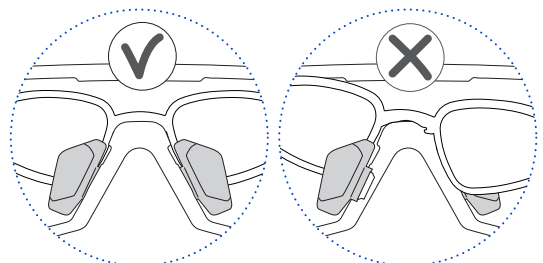


// 01

// 02

SUN LENS  
ALWAYS ON

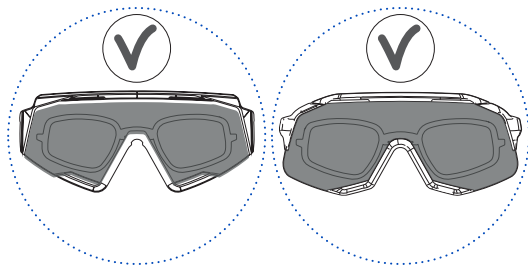

ONLY FOR  
SPORT USE

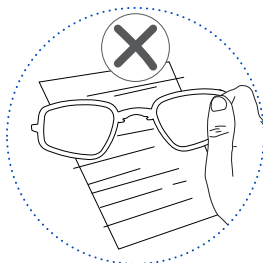

**IT Impiego:** dispositivo medico di Classe I, secondo la Regola 1, dell'allegato VII del Regolamento Europeo 745/2017 sui Dispositivi Medici, il cui uso inteso è l'associazione a lenti oftalmiche per la correzione di difetti visivi. Sono conformi al Regolamento Europeo 745/2017.

**Avvertenze:** non si può escludere che soggetti sensibili o allergici possano manifestare reazioni avverse per contatto con i materiali e trattamenti utilizzati. **Pulizia:** il clip-in va conservato ad una temperatura fra -10°C e +35°C. Evitare l'esposizione al sole in ambienti chiusi non condizionati (es. cruscotto auto) perché le temperature raggiunte in tali condizioni possono danneggiarne la funzionalità. In caso di contatto con agenti come acqua salata (acqua di mare) pulire immediatamente con acqua dolce e sapone neutro. In caso di usura si consiglia la sostituzione. Per la pulizia usare un panno umido e un normale detergente neutro, e asciugare con panno morbido pulito. Evitare l'impiego di solventi (es. alcol o acetone) e detergenti chimici aggressivi. **Marcatore:** identificativo del modello e data si trovano sull'etichetta.

**Segnalazioni:** in caso non sia possibile contattare il punto vendita, per reclami o anomalie indirizzare la richiesta a [info@kooworld.cc](mailto:info@kooworld.cc)

**EN Use:** class I medical device, as for Rule 1, Annex VII of EU Regulation 745/2017 on Medical Devices, whose intended use is the association with ophthalmic lenses for the correction of visual defects. Compliant with EU Regulation 745/2017. **Warning:** it cannot be excluded that sensitive or allergic subjects may experience adverse reactions in contact with the materials and treatments used. **Care and cleaning:** the clip-in must be stored at a temperature between -10 ° C and + 35° C. Avoid exposure to the sun in closed, unconditioned environments (e.g. car dashboard) because the temperatures reached in such conditions can damage its functionality. In case of contact with agents such as saltwater (seawater), clean immediately with fresh water and neutral soap. In case of wear, replacement is recommended. For cleaning, use a damp cloth and a normal neutral detergent, and dry with a clean soft cloth. Avoid the use of solvents (e.g. alcohol or acetone) and aggressive chemical detergents. **Marking:** model identification and date are printed on the label. **Complains:** if it is not possible to contact the store where it was purchased, for complaints or anomalies, send the request to [info@kooworld.cc](mailto:info@kooworld.cc)

// [kooworld.cc](http://kooworld.cc)

KASK S.P.A. Via Firenze 5, 24060 Chiuduno (BG) - ITALY

© 2021 KASK S.P.A. All rights reserved.

420272 - 02/2021



# KOOWORLD